

COMPRESSOR NEBULIZER


NE-C29




DAFTAR ISI

Pengenalan Alat 1
 Mempersiapkan Nebulizer 2
 Melakukan Inhalasi 3
 Pemeliharaan dan Penyimpanan 4
 Masalah dan Solusinya 5

PENGENALAN ALAT

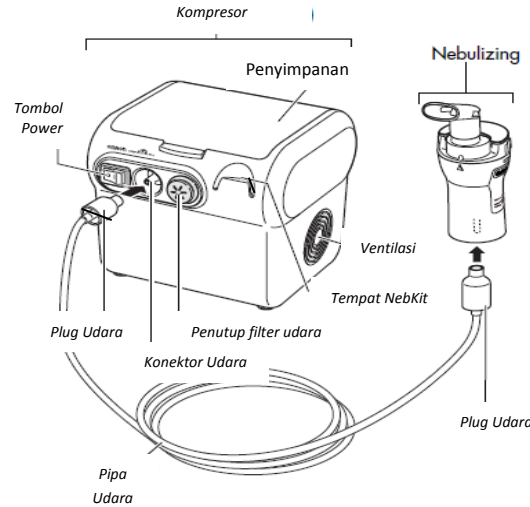


NEBULIZER KIT (NEBKIT) :

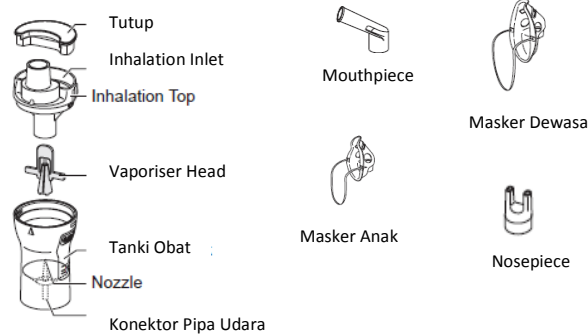

MEMPERSIAPKAN NEBULIZER




1. Sambungkan kabel daya ke stop kontak, pastikan alat dalam posisi OFF
2. Lepaskan tutup dan inhalation top dari tanki obat

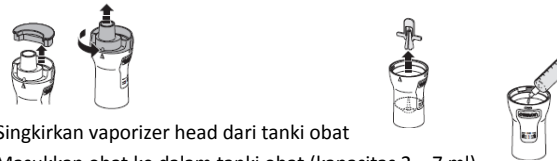

3. Singkirkan vaporizer head dari tanki obat
4. Masukkan obat ke dalam tanki obat (kapasitas 2 – 7 ml)
5. Masukkan kembali vaporizer head ke dalam tanki obat



6. Satukan kembali inhalation top dengan tanki obat. Sejajarkan bagian seperti gambar disamping, lalu putar searah jarum jam sampai berbunyi "klik"
7. Satukan tutup/ masker/ mouthpiece/ nosepiece dengan nebkit
 Jika menggunakan masker, jangan menggunakan tutup nebkit. Akan tetapi jika jumlah aerosol terlalu banyak gunakan penutup
8. Sambungkan pipa udara, putar sedikit ujung pipa udara dan sambungkan ke konektor
9. Gunakan nebkit holder untuk nebkit selama tidak digunakan

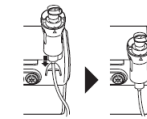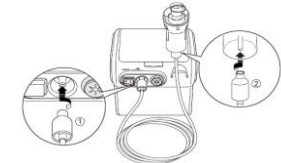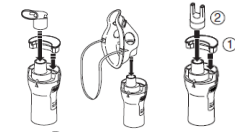

MELAKUKAN INHALASI

1. Pegang dan tahan nebkit seperti gambar disamping. Saat menggunakan masker pastikan masker menutupi hidung dan mulut
 Jangan miringkan nebkit lebih dari 45° karena obat dapat tumpah atau alat tidak dapat bekerja dengan semestinya
2. Nyalakan alat, saat kompresor menyala, nebulisasi dimulai dan aerosol dihasilkan. Hirup uap obat.
3. Setelah selesai matikan kembali alat



PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN

Harap bersihkan bagian dari nebulizer setiap habis pemakaian. Pastikan alat dalam posisi OFF dan tidak terhubung dengan stop kontak.


- Nebkit, masker, mouthpiece, nosepiece dapat dicuci dengan air hangat dan detergent ringan. Cuci bersih dengan air panas dan keringkan. Nebkit harus diganti setelah pemakaian selama 6 bulan.
- Kompresor, pipa udara, dibersihkan dengan kain yang telah dilembutkan dengan air dan detergen ringan.
- Pastikan alat selalu disterilkan setelah pemakaian; apabila alat ternoda berat harap ganti dengan yang baru
- Gunakan disinfectant lalu cuci dengan air hangat dan keringkan. Jangan gunakan benzene, thinner atau bahan kimia yang mudah terbakar
- Vaporiser harus selalu dibersihkan setelah penggunaan. Jangan gunakan sikat atau jarum untuk membersihkan
- Alat juga bisa dididihkan selama 15 – 20 menit, **KECUALI** untuk pipa udara, masker (PVC), filter udara dan penutup filter udara

MENGHILANGKAN EMBUN DARI PIPA UDARA

1. Pastikan pipa udara terhubung dengan konektor udara pada kompresor
2. Singkirkan nebkita dari pipa udara
3. Nyalakan kompresor dan pompa udara melalui pipa udara untuk menghilangkan embun/ sisa air

MENGGANTI FILTER UDARA

Jika filter udara sudah berubah warna atau digunakan lebih dari 60 hari, harap ganti dengan yang baru

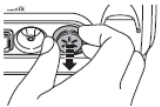

Tarik penutup filter udara dari kompresor

1.

Ganti filter udara dengan objek tajam, contoh : tusuk gigi dan masukan filter



2. udara baru. Taruh kembali ke unit utama

NOTE

- Gunakan hanya filter OMRON
- Jangan cuci filter. Jika terkena air, harap ganti dengan yang baru
- Tidak ada orientasi depan atau belakang untuk filter udara
- Cuci penutup filter secara berkala. Jangan dididihkan

MASALAH DAN SOLUSINYA

Masalah	Penyebab	Solusi
Tidak ada yang terjadi saat alat dalam posisi ON	Apakah kabel sudah terpasang dengan stop kontak	Periksa sambungan kabel. Cek di stop kontak lain jika perlu
Unit tidak dapat melakukan nebulisasi, atau volume nebulisasi rendah	Apakah obat sudah dimasukkan	Masukkan jumlah obat yang sesuai/ dianjurkan
	Apakah obat terlalu banyak/ sedikit	
	Apakah vaporizer hilang/ tidak terpasang dengan benar	Pasang vaporizer dengan benar
	Apakah nebkita terpasang dengan benar	Cek dan pasang nebkita dengan benar
	Apakah Nozzle terhalang	Pastikan bebas halangan
	Apakah saat memegang nebkita terlalu miring	Pastikan nebkita tidak miring melebihi 45°
	Apakah pipa udara terpasang dengan benar	Pastikan pipa udara terhubung dengan benar
	Apakah pipa udara tertekuk atau rusak	Pastikan pipa udara lurus, tidak tertekuk
Alat mengeluarkan bunyi yang sangat keras	Apakah pipa udara tersumbat	Pastikan bebas dari sumbatan
	Apakah filter udara kotor	Harap ganti dengan yang baru
Alat sangat panas	Apakah penutup filter udara sudah terpasang dengan benar	Pasang penutup filter udara dengan benar
	Apakah kompresor tertutup	Jangan tutup kompresor dengan penutup apapun
	Apakah lubang ventilasi terhalang	Jangan tutup lubang ventilasi terhalang

Jika masih ada masalah lain harap hubungi customer service OMRON